

## InTENSity 5000 Hybrid (TENS Análogo y digital. 2 canales - 4 electrodos)


Equipo de estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, para el tratamiento del dolor, analógico y digital, de total portabilidad, fácil de usar. Cuenta con una pantalla LED que muestra de forma exacta el nivel de intensidad, tiempo y modulación.



### Características del producto

- Dispositivo portátil, fácil de operar
- Viene completo con estuche de transporte, juego de cables, batería 9V, adaptador, paquete de 4 electrodos y manual.
- 1 año de garantía
- Registro Invima

#### Forma de onda:

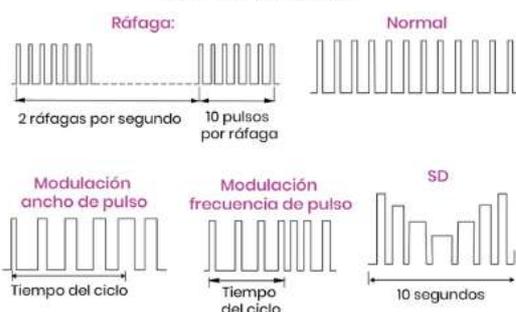

<b>Item</b>	DI3302
<b>Referencia</b>	InTENSity 5000 Hybrid
<b>Cantidad</b>	1

### Especificaciones del producto

<b>Canal</b>	Doble, aislado entre canales.
<b>Amplitud de pulso</b>	Regulable de 0-80mA con carga de 500ohm/ canal
<b>Frecuencia de pulso</b>	Ajustable de 2 a 150Hz, tarifa de exposición 0,5Hz modo ráfaga
<b>Ancho de pulso</b>	Regulable de 30 a 260µs microsegundos.
<b>Voltaje</b>	0 a 40V (carga 500ohm)
<b>Ráfaga (B)</b>	Las explosioones se producen dos veces x sg, el ancho de pulso ajustable, la frecuencia de pulso = 100Hz, la frecuencia de ráfagas = 0.5Hz.
<b>Modo normal (N)</b>	La frecuencia y el ancho de pulso son ajustables, genera una estimulación continua basada en el valor del ajuste.
<b>Modo modulación 1 (M1 y M2)</b>	Es una modulación de ancho de pulso, el cuál varía automáticamente en un patrón de ciclo en un intervalo nominal de 10sg.
<b>Modo SD</b>	(Fuerza-duración) consiste en la intensidad de modulación automática y el ancho de pulso en el rango de 70%, la intensidad está siempre en aumento, mientras que la anchura está disminuyendo y viceversa. El tiempo total del ciclo es de 10sg, la frecuencia del pulso (2-150Hz)-nd
<b>Forma de onda</b>	Onda de pulso cuadrado monofásico.
<b>Temporizador</b>	15-30-60 min o continuo.
<b>Fuente de alimentación</b>	Batería de 9V y adaptador
<b>Tamaño</b>	11,6cm x 6,6cm x 2cm
<b>Peso</b>	131 gramos, batería incluida.